

## SCANSTATION 100



- ScanStation 100 es un equipo que centraliza la incubación, detección y recuento de colonias en placas de Petri. Las colonias son detectadas y contadas tan pronto como aparezcan. Su crecimiento puede ser seguido en tiempo real. ScanStation 100 tiene capacidad para 100 placas de Petri.
- Capacidad: hasta 100 placas de Petri
- Recuento de siembras en masa, superficie, espiral, membranas de filtración
- Diámetro de placa de Petri: Ø 55 a 65 mm, Ø 90 mm
- Precisión de la temperatura de incubación:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Intervalo de lectura entre cada placa: 30 min o 1h
- Índice de protección: 20
- Peso neto ScanStation (sin opción): 270 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Crecimiento bacteriano en tiempo real

- Desde el inicio de la incubación, cada una de las 100 placas de Petri es fotografiada cada 30 min/1 hora. Las colonias son detectadas y contadas tan pronto como aparezcan. Descubra el crecimiento bacteriano hora por hora y obtenga resultados anticipados.



- Por ejemplo: coliformes en agar VRBL incubados a 37 ° C

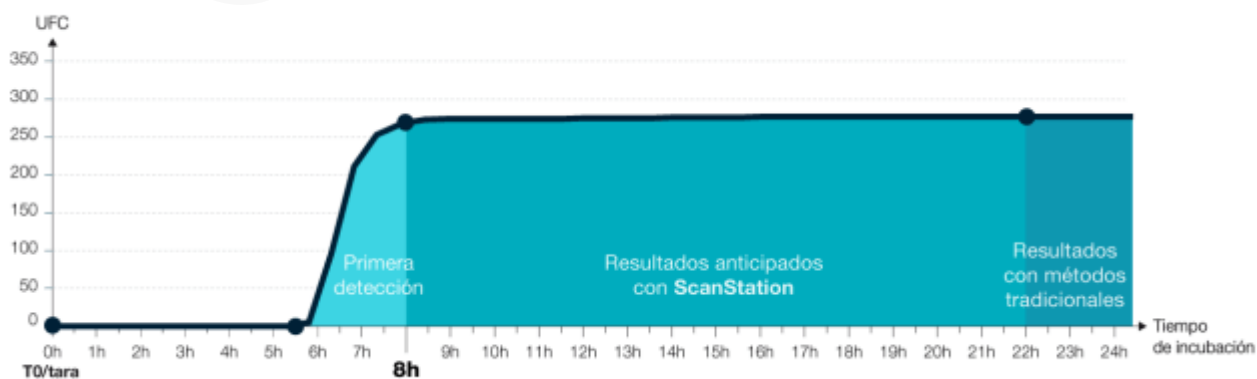


### Un concepto revolucionario

- El recuento de colonias es realizado automáticamente durante la incubación.
- Observamos la creación de un vídeo del crecimiento bacteriano en tiempo real.

## Un incubador para 100 placas de Petri

- ScanStation 100 se compone de un carrusel rotativo de almacenamiento con capacidad para 100 placas de Petri.
- Las 100 placas de Petri son procesadas simultáneamente en estufa termoregulada con efecto Peltier  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

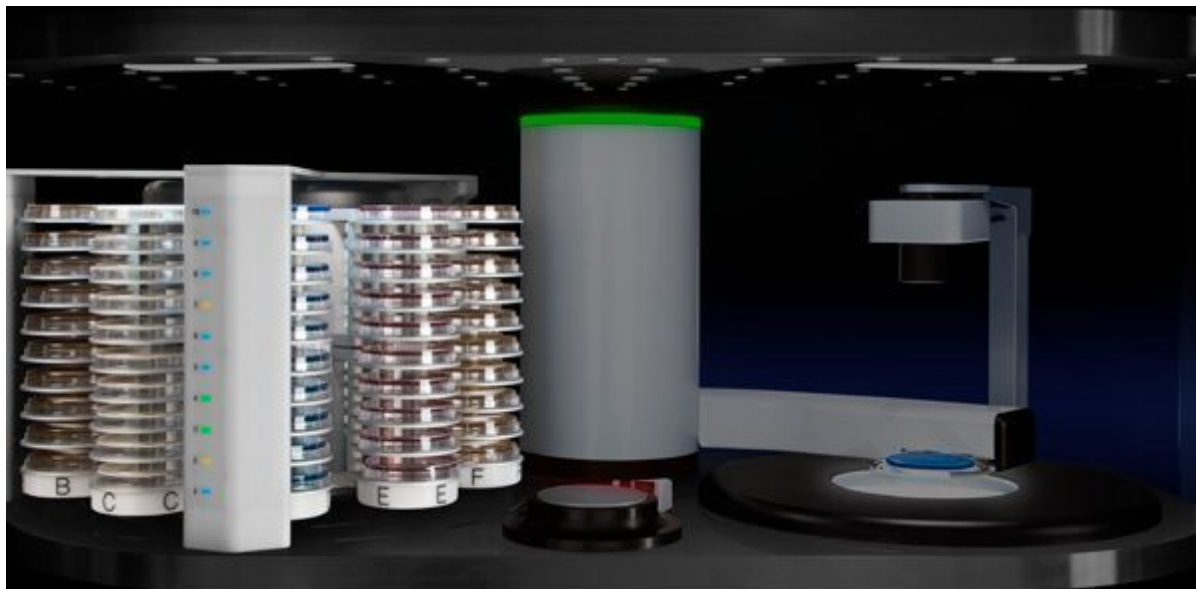

### 1 Brazo robótico

Un brazo robótico transfiere las placas de Petri para tomarlas fotos a intervalos

El brazo robótico transfiere las placas de Petri del carrusel a la cámara para tomar las fotografías a intervalos. ScanStation cuenta con una pinza sensible a la presión, adaptable a todo tipo de placa de Petri.

### El contador automático de colonias detecta y cuenta colonias tan pronto como estas aparezcan


- La cámara ultra HD de 5 megapíxeles detecta colonias tan pronto como estas aparezcan, antes de la formación de confluencia o cubrimientos, y disociando artefactos.
- Obtiene los resultados más precisos en menor tiempo y puede ver el crecimiento bacteriano durante y después de la incubación.

### Resultados de alto rendimiento




### Trazabilidad

- Los datos están guardados y accesibles durante la incubación hasta la validación final de resultados.

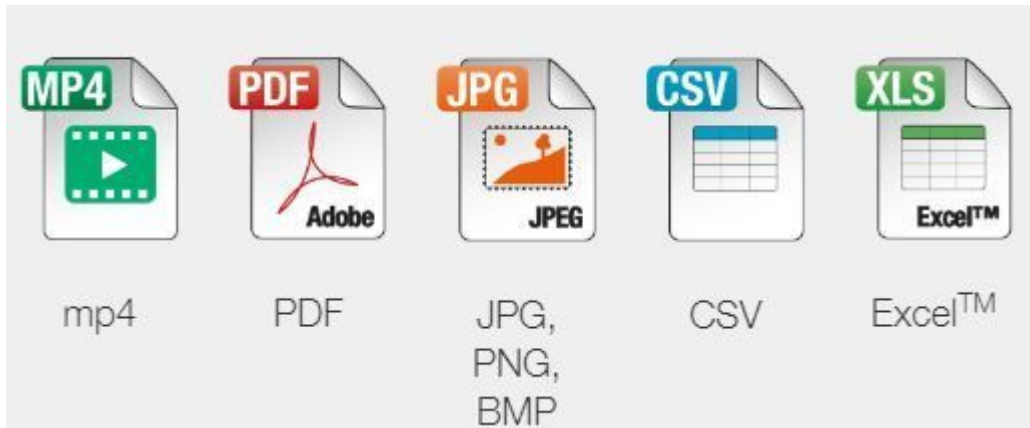

### Integridad de los datos

- ScanStation guarda imágenes y vídeos del crecimiento bacteriano desde el inicio hasta el final de la incubación. Puede recuperar los datos después de la fecha de la incubación.
- El vídeo de crecimiento bacteriano ayuda a validar resultados mostrando la diferencia entre una partícula y una bacteria, evitando falsos negativos. Las imágenes tomadas a intervalos regulares permiten visualizar el inicio del crecimiento de microorganismos tales como moho para facilitar su recuento.
- El software ScanStation es conforme con las guías FDA 21 CFR Part 11: permite las firmas electrónicas, las pistas de auditoría e información encriptada. Se puede atribuir accesos diferenciados entre los usuarios

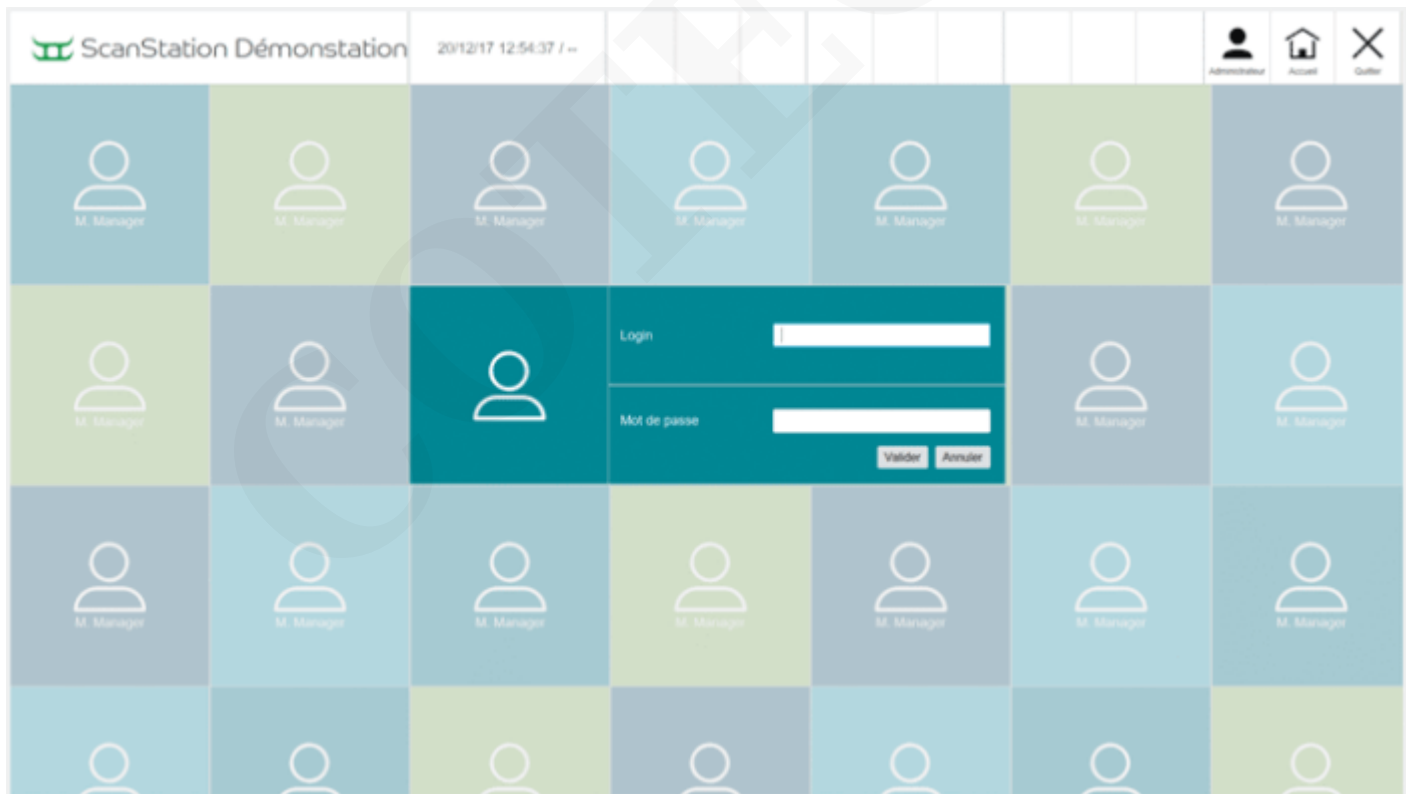


### Mono o multi-batch

- La carga de las placas de Petri se puede realizar al inicio o durante la incubación. **ScanStation** procesa simultáneamente cargas con diferentes ajustes de iluminación o diferentes tiempos de incubación.



### DataLink

- El lector de código de barras integrado puede leer la mayoría de los códigos 1D/2D del mercado, incluyendo los códigos QR y datamatrix.
- ScanStation es compatible con sembradores espiral y con el sistema dataLink, lo cual permite evitar errores de transcripción y ahorrar tiempo.

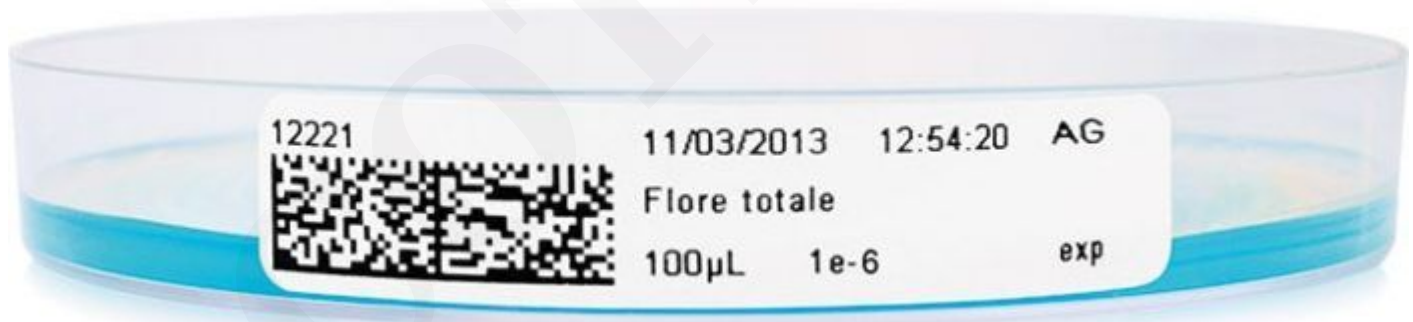

### Pantalla central

- Ergonomía optimizada para su laboratorio
- La pantalla central reduce el espacio lateral ocupado por la ScanStation. Ahora necesitaremos 175 cm frente a 245 cm con ScanStation equipada con el soporte lateral de la pantalla y teclado. Es una opción interesante para nuestros clientes que planifican acoplar varias ScanStation en su laboratorio. Este accesorio está disponible para todos los modelos de ScanStation 100 , ScanStation 200 y ScanStation 300.



Ocupación con pantalla lateral



Ocupación con pantalla central



#### Pétalos extraíbles

- Limpieza y desinfección facilitadas
- Para facilitar el acceso a la plataforma interior del carrusel, los bloques de 5 pétalos de abajo pueden ser removidos fácilmente gracias a su montaje magnético. De modo que el interior de la ScanStation es fácilmente accesible y limpiable. Esta novedad será incorporada en toda la gama ScanStation : ScanStation 100 , ScanStation 200 y ScanStation 300



## Aplicaciones

- ScanStation, incubador y contador de colonias automático, se integra en diferentes campos de aplicación. Su flexibilidad permite adaptarse a cualquier protocolo, como biocarga, challenge tests, recuento y control de calidad. El monitoreo en tiempo real ofrece resultados anticipados para validación.



## Especificaciones Técnicas

Referencia	ScanStation 100
Capacidad	439 100
Intervalo de lectura entre cada placa	100 placas de Petri
Tamaño de placa de Petri	30 minutos o 1 hora
Tipo de siembra aceptado	Ø 90 mm tapa hacia arriba o hacia abajo y Ø 55-65 mm (con adaptador)
Carga	en masa, superficie, Spiral, membrana de filtración
Resolución de la cámara	Unica o multi-batch
Interface	5 megapíxeles
Exportación de datos	pantalla táctil de 23 pulgadas
Video	video mp4, pdf, jpeg, png, bmp, csv y xls
	Reproducir, zoom, pausar, repetir durante y después de la incubación

Sistema informático incluido	PC Windows 10 LTSC desktop con procesador Intel i7
Software	Software ScanStation
Temperatura de incubación	de 20°C a 45°C
Precisión de la temperatura de incubación	± 1°C (verificado por un sistema de mapeo en 9 puntos)
Registro de temperatura	Cada minuto
Tecnología de calentamiento y refrigeración	módulos Peltier, sin compresor
Temperatura externa	de 18°C a 25°C
Humedad externa maximal	0.7
Tiempo de incubación maximal	10 días
Iluminación interna LED	✓
Puerta con bloqueo electrónico	✓
Pinza sensible a la presión para adaptarse a cualquier tipo de placa	✓
Arquitectura robótica con incubador, pinza y contador de colonias	✓
Plataforma de aluminio extra rígida	✓
Dimensiones (w x d x h)	135.3 x 82.3 x 94.4 cm
Peso neto ScanStation (sin opción)	270 kg
Dimensiones sin asas (w x d x h)	135.3 x 78.6 x 94.4 cm
Dimensiones del mueble (altura)	59,6 cm
Peso neto del mueble	70 kg
Altura total con mueble	146 cm
Caja (w x d x h)	168.6 x 96 x 207 cm
Peso bruto (sin opción)	429 kg
Cumple con	21 CFR Part 11
Voltaje y Frecuencia	100-240V~ 50-60 Hz
Indice de protección	20
Potencia max	2000 W
Garantía	1 año
	Incluye: 1 ordenador y su cable de alimentación O 1 servidor con su cable de alimentación, 1 antena Wifi conectada al ordenador o servidor, 1 pantalla con su cable de alimentación, 1 cable Display port, 1 cable USB 3, 1 teclado inalámbrico, 1 ratón inalámbrico, 1 dongle para teclado y ratón inalámbrico, 1 cable de alimentación general del equipo, 1 mapa de temperatura, 1 manual de usuario, 1 kit de mantenimiento que incluye 1 botella de limpiador óptico y 1 bomba de grasa, 1 patrón de prueba





## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO