

## GABINETE PORTÁTIL PARA EL MUESTREO LIMPIO 400



**SKU:** B-01-12-09-000101 | **Categorías:** [Gabinete portátil para muestreo limpio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Gabinete portátil para el muestreo limpio

Se utiliza para muestrear material crudo o para ayudar en la preparación de medicamentos (excepto preparación libre de gérmenes). Alcanza diez mil niveles de limpieza de acuerdo con el estándar GMP. Además, los componentes eléctricos cumplen con gb1497—85 (estándar de seguridad eléctrica) y estándar.

### Método de uso

- Mueva el gabinete de muestreo limpio al lugar que necesita realizar las muestras. Puede prepararlo y conectarlo a la fuente de alimentación.
- Encienda el suministro de energía y encienda el ventilador.
- Regular el voltaje al rango correcto (generalmente 220 v); coloque el barril de muestreo después de que el gabinete de muestreo limpio funcione durante 15 min.
- Quitar el barril de muestreo después de la muestra. Apague el ventilador y apague el suministro de energía. Mueva el vehículo de muestreo al lugar donde suele dejarlo.

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-12-09-000101	B-01-12-09-000102
Modelo	BellVehMueLim-400	BellVehMueLim-800
Condición de trabajo nominal		Temperatura 5 ° C ~ 40 ° C
Humedad relativa		≤80%
Presión atmosférica		86 ~ 106KPa
Apariencia	El cuerpo de la caja del gabinete de muestreo está hecho de acero inoxidable o placa de acero. La cortina decorativa es lisa y vertical.	
Manejabilidad	Flexible y confiable	
Iluminación	La iluminación promedio no puede ser inferior a 86 ~ 106KPa	
Eficacia depurativa	Nivel diez mil o nivel cien mil	
Velocidad media del aire	0,4 ± 20% (ajustable)	
Ruido	No más de 63db (A)	
Vibración	X, Y, Z El rango de vibración no supera los 3 μm	
Dimensión del área de trabajo (Largo x Ancho x Alto)	730×650×950mm	1030 * 650 * 950 mm
Dimensión total (Largo x Ancho x Alto)	900×730×1950mm	1200 * 730 * 1950 mm
Fuente de alimentación	CA 220V / 50HZ	
Max. potencia (W)	400W	800W
Peso	150Kg	300Kg
Material	Plancha de acero / acero inoxidable	

## ALL STAINLESS STEEL PORTABLE SAMPLING CLEAN VEHICLE/BOOTH

### WEIGHING BOOTH

- ▶ The experimental area is made of stainless steel cover.
- ▶ Move up and down the glass, the convenient and flexible.
- ▶ Uninterruptible power supply, use with convenient sampling.




## PRODUCT INTRODUCTION





# Temperature measurer

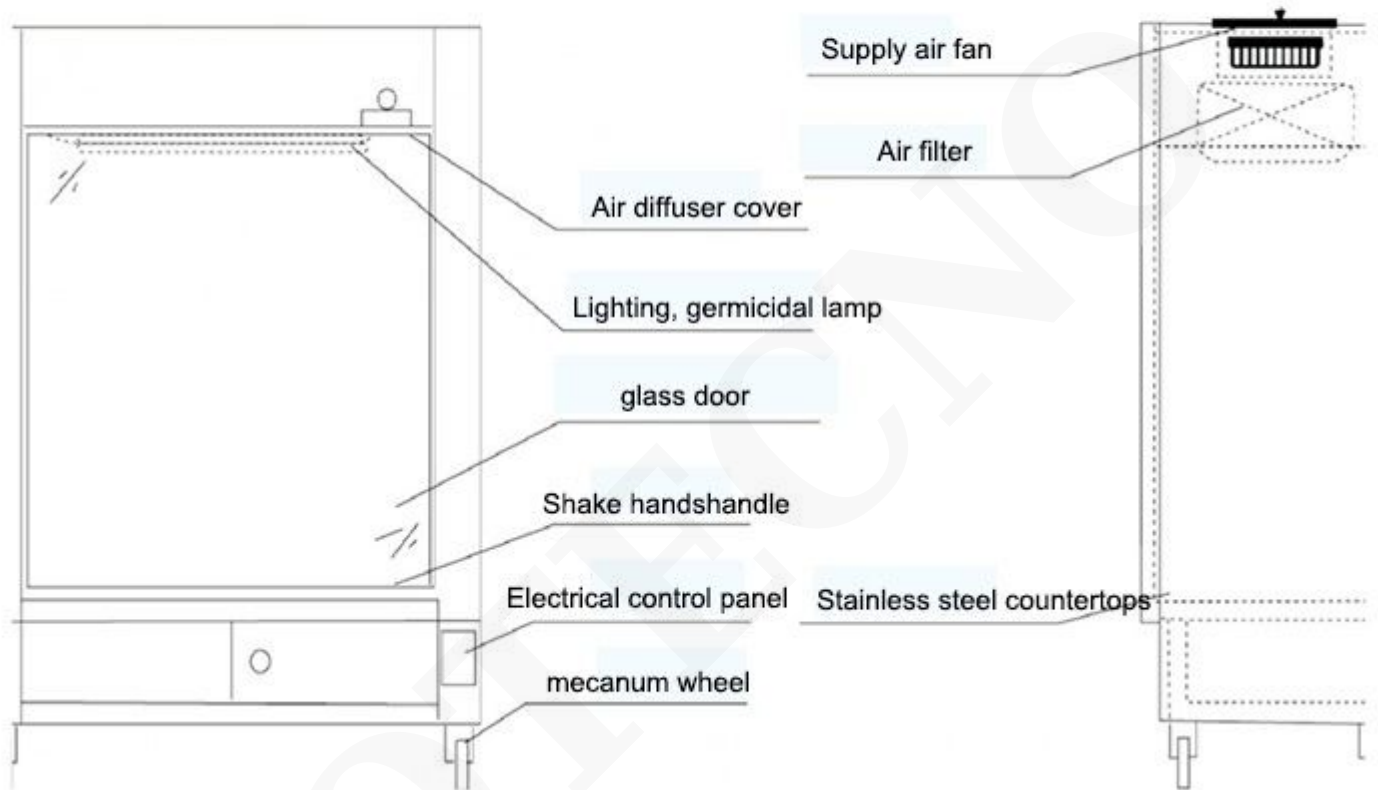

## PRODUCT DETAILS




### Ultraviolet lamp

Uv disinfection function, it is recommended to use the equipment before starting with UV disinfection 5 to 10 minutes

### Headlamp

Ensure the work environment is bright, open the lights to avoid the working environment during the work

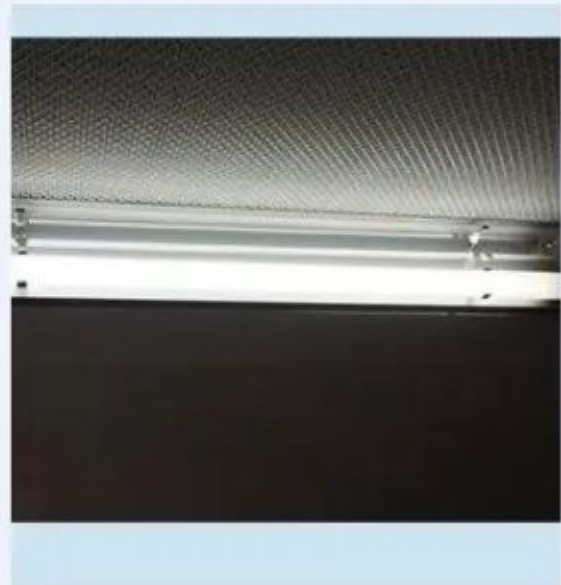



## LCD Control Panel

Touch switch, more convenient to operate, can more intuitive understanding of the work of clean bench.

## Filter

Using superfine glass fiber paper as filtering material, offset paper, aluminum film and other materials as fengeban, glued with wood frame aluminum alloy.





## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO