


IMPACTADOR COATER IC 200i - RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE DE IMPACTACIÓN AUTOMATIZADO

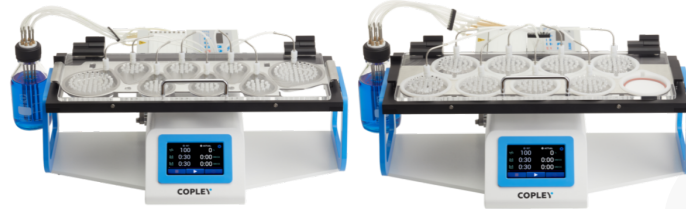

SKU: IC 200i | **Categorías:** [semiautomatización para pruebas APSD](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impactor Coater™ IC 200i - Recubrimiento de superficie de impactación automatizado

El Impactor Coater™ IC 200i aplica de forma reproducible recubrimientos superficiales tanto a las tazas de recogida NGI como, por primera vez, a las placas de recogida ACI, lo que elimina el problema del rebote y el arrastre de partículas cuando se utilizan impactadores en cascada para medir el APSD de los OINDP.

Al estandarizar la aplicación del recubrimiento superficial a cada superficie de recolección, el IC 200i elimina la variabilidad inherente asociada con el proceso de recubrimiento, al tiempo que aumenta la productividad y el rendimiento del laboratorio.

Compatibilidad

Interfaz de usuario

Tasa de dispensación

Dispensar e invertir el tiempo de ciclo

Vasos de colección NGI

Placas de recolección ACI

Pantalla táctil

0 - 100%

0 - 10 minutos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Cubre superficies en tan solo 2 minutos



Libera a los analistas para otras tareas



Permite una fácil transferencia de métodos entre sitios



Minimiza el desperdicio de solución de recubrimiento

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO